

Forholdsregler

- Se behandlingsenhetens brukerveiledning for detaljer om innstillinger og driftsinformasjon.
- Maskens tekniske spesifikasjoner er angitt slik at din behandler kan sjekke at de er kompatible med behandlingsenheten. Ved bruk utenfor spesifikasjonene vil forseglingen og komforten kanskje ikke være effektiv, optimal behandling vil kanskje ikke oppnås, og lekkasje eller variasjon i lekkasjefrekvensen vil kunne påvirke enhetens funksjon.
- Masken skal rengjøres annenhver dag for å forhindre skitt og oljer fra huden i å bygge seg opp i masken.
- Masken må ikke rengjøres med rengjørings- eller desinfiseringsmetoder som ikke er godkjente.
- Brukeren bør rengjøre ansiktet før masken tas på.
- Pasienten må ikke endre på maskens design.
- Masken må ikke plasseres i tørketrommel eller tørkeskap.

Kontraindikasjoner

- Ingen

Tekniske Spesifikasjoner

1. Behandlingstrykk: 4 til 20 cmH₂O
2. 22mm sviveltilkobling
3. Motstand (trykkfall)
@ 50 lpm = 0.4 cmH₂O
@ 100 lpm = 0.9 cmH₂O
4. Fast lekkasjefrekvens (luftstrøm kan variere som følge av produksjonsvariasjoner):

Trykk (cmH ₂ O)	4	5	10	15	20
Luftstrøm (lpm)	17	19	29	37	45

5. Miljømessige lagrings- og bruksforhold er ikke forventet å påvirke funksjonen til denne enheten.
6. Lydnivå
 - A-vektet lydeffektnivå, 26 dBA
 - A-vektet lydtryknivå @ 1m, 18 dBA
7. Denne enheten er forventet å være egnet for bruk i en periode på minst 90 dager ved normal bruk og rengjøring.
8. Denne enheten er ikke laget av naturgummilateks.

Begrenset garanti www.circadiance.com/help



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands



0459

For patenter og varemerker som gjelder Circadiance-produkter, vennligst besøk www.circadiance.com/IP

101665 REV 2

Circadiance

SleepWeaver
Soft Cloth Masks

Advance small

Bruksanvisning


Norsk

Tiltenkt bruk

Denne SleepWeaver-masken er ment for bruk til behandling med et CPAP-apparat (kontinuerlig positivt luftveistrykk) eller bilevel-apparat. Denne masken er tiltenkt gjenbruk på én pasient i hjemmemiljø og i sykehus-/institusjonsmiljø. Denne masken skal brukes på pasienter som veier mer enn 30kg (66 lbs).



Finne riktig passform

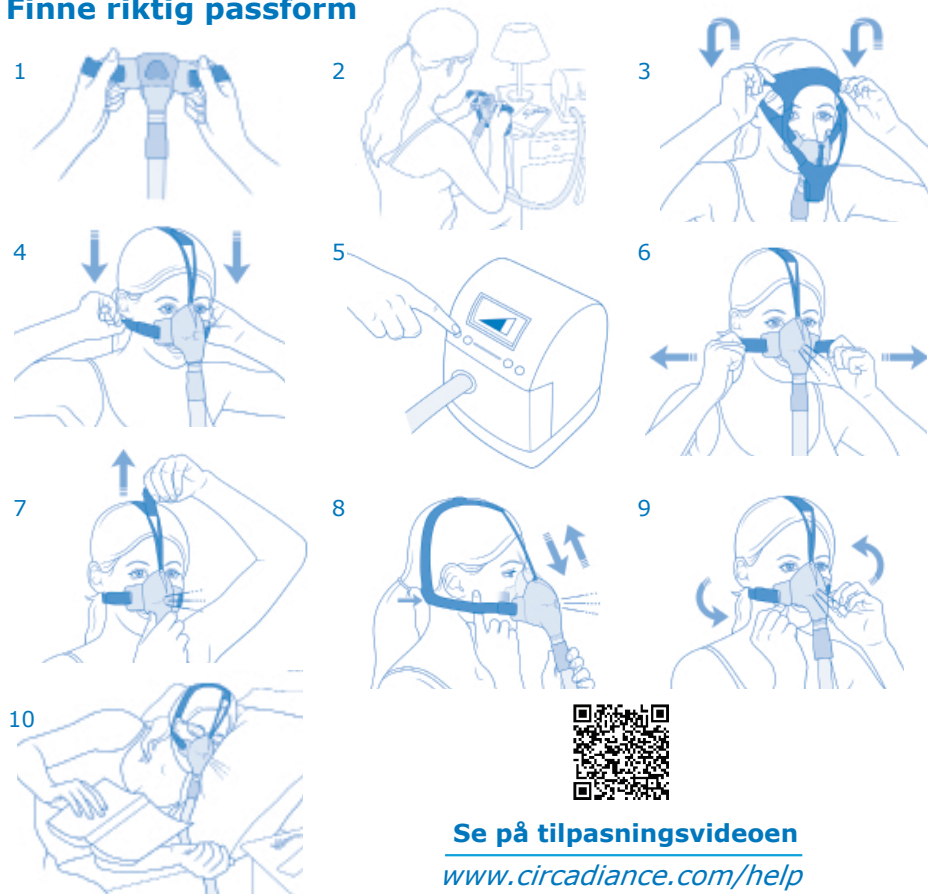

Se på tilpasningsvideoen

www.circadiance.com/help



Postadresse: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235
Besøksadresse: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145
Telefon: 888-825-9640 or +1 724-858-2837
cservice@circadiance.com www.sleepweaver.com

Tilpasning av Masken, Fortsettelse

1. Fjern masken fra innpakningen. Dersom du har tatt festestroppene av masken, fest festestroppene igjen gjennom åpningene i maskens vinger (bilde 1). Koble slangen fra maskinen til plastslangekoblingen foran på masken.
2. Ta på deg masken ved å dra festestroppene over hodet slik at maskens kopp ligger over nesen og hodestroppen er midt på pannen (bilde 2 & 3).
3. Dra festestroppene over bakhodet til nakkestroppen hviler under ørene dine (bilde 4).
4. Skru på maskinen (bilde 5).
5. Juster nakkestroppene først slik at maskens nedre del hviler behagelig på overleppen rett under neseborene (bilde 6).
6. Juster hodestroppen for å trekke masken behagelig mot nesen din (bilde 7).
7. Pass på at festestroppene ikke er strammet for mye, du skal enkelt kunne få plass til en finger under hver stropp (bilde 8).
8. Legg deg ned i din vanlige sovestilling og flytt eventuelt rundt på masken slik at stoffet lager en forsegling mot huden din (bilde 9 & 10). Ytterligere tilpasningstips finner du i det følgende avsnittet, og du kan se en detaljert tilpasningsvideo på www.circadiance.com/help.

Fjerne lekkasjer - Prøv følgende hvis det oppstår lekkasje:

1. Slå på CPAP- eller to-nivå-apparatet med det forskrevne trykket, klem den delen av masken som sitter rett over nesen, trekk masken litt vekk fra ansiktet mot føttene, og slipp opp forsiktig.
2. Hvis det oppstår lekkasje på siden av masken, justerer du nakkestroppene ved å løsne fliken fra stroppen og trekke stroppene ut for å stramme masken. Fest deretter fliken til stroppen igjen.
3. Juster hoderemmen hvis det lekker luft inn mot øynene.
4. Det kan av og til være mulig å stanse lekkasjer og oppnå bedre passform ved å løsne masken litt, og deretter gjenta trinn 1.
5. Det kan også oppstå lekkasjer hvis stroppene på hoderemmen er for stramme eller for løse. Med litt trening bør du klare å finne frem til en tettsittende, men komfortabel passform.

Rengjøringsanvisninger for hjemmebruk - Individuell bruk

1. Håndvask masken annenhver dag i varmt vann, med en mild såpe uten skuremidler. La masken lufttørke uten å utsettes for direkte sollys.
2. Håndvask festestroppene ukentlig.
3. Etter en viss periode med bruk, vil bandasjetapen som fester koblingsstykket til masken, miste klebeevnen. Den må byttes ut.
4. Koblingsstykket er festet til masken med lateksfri, hvit bandasjetape. Du kan ta av koblingsstykket og rengjøre det separat ved å bløtlegge det i en oppløsning bestående av 1 del eddik til 3 deler vann (1 dl eddik til 3 dl vann).
5. Skyll koblingsstykket godt etter bløtlegging, og la det tørke.
6. Sett på koblingsstykket igjen med lateksfri bandasjetape. (Les delene som omhandler koblingsstykket.)

Ta av masken

1. Du tar av SleepWeaver ved å trekke masken vekk fra nesen og løfte hoderemmen av hodet.
2. Det er ikke nødvendig å løsne stroppene på hoderemmen. Med litt trening vil du klare å trekke den av og på etter å ha justert passformen riktig.

Ta av koblingsstykket - Det er ikke nødvendig å ta av koblingsstykket og skifte tapen hver gang du vasker masken, med mindre du har en kronisk sykdom og legen eller respirasjonsspesialisten har anbefalt det, eller hvis masken brukes i et søvnlaboratorium.

1. Vreng masken slik at du ser den hvite bandasjetapen som fester koblingsstykket til masken, og fjern den gamle tapen.
2. Skyv koblingsstykket gjennom nesehullet og ut av masken for rengjøring.
3. Rengjør masken ved å følge rengjøringsanvisningene ovenfor.
4. Rengjør koblingsstykket separat ved å bløtlegge det i en oppløsning bestående av 1 del eddik til 3 deler vann. Skyll godt etter bløtlegging, og la lufttørke.

Sette på koblingsstykket igjen- Bruk lateksfri, vanntett, hvit bandasjetape.

1. Når både koblingsstykket og masken er helt tørre, vrenger du masken igjen.
2. Sett koblingsstykket inni masken slik at "hann"-delen (kanten) stikker ut ca. 1.25 cm fra stoffet.
3. Riv av et stykke hvit, lateksfri bandasjetape som er ca. 27 cm langt.
4. Hold koblingsstykket i masken med den ene hånden, og begynn å teipe langs kanten. Påse at tapen dekker halve stoffet og halve koblingsstykket.
5. Vikle tapen rundt koblingsstykket og masken minst 3 ganger.
6. Skjær av overflødig tape hvis det er nødvendig, og bruk fingrene til å glatte ut eventuelle rynker.
7. Du finner også anvisninger på Internett på www.circadiance.com/help



⚠ Advarsler

- Enheten er en ventilert maske og bør ikke brukes med en ventilasjonskrets med dobbel luftslange.
- Dersom en reaksjon på noen som helst del av denne masken eller festestroppene oppstår, stopp bruken umiddelbart.
- Dette systemet må ikke brukes dersom ikke behandlingsenheten er skrudd på og virker som den skal.
- Ventilasjonshullene må aldri blokkeres.
- Påse at masken er riktig satt på. Påse at masken og festestroppene er montert og plassert slik vist på forsiden av denne bruksanvisningen.
- Dersom noen som helst synlig forringelse av systemkomponenter oppstår (sprekkdannelse, ødelagte deler, rifter, etc.), eller dersom komponenter forblir urene etter rengjøring, bør komponenten kastes og erstattes.
- Endring til en annen frekvens, metode eller rengjøringsmiddel enn det som angis i denne bruksanvisningen for rengjøring av dette produktet, kan ha en uheldig effekt på masken og følgelig på sikkerheten eller kvaliteten av behandlingen.
- Dersom masken brukes med tilleggsoksygen må oksygentilførselen skrues av dersom maskinen ikke er i bruk, fordi ansamlet oksygen er brannfarlig.
- Dersom masken brukes med tilleggsoksygen bør pasienten avstå fra røyking.
- Dette produktet er kun beregnet for gjentatt bruk på én pasient, og er ikke godkjent for gjenbruk (rengjørings- og desinfiseringsmetoder) i en klinisk setting. Kun de rengjøringsmetodene som beskrives i denne bruksanvisningen bør brukes, både for hjemmebruk og klinisk bruk.