

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Ayarlara ve kullanım bilgilerine dair ayrıntılar için tedavi cihazınızın kılavuzuna bakınız.
- Maskeye ait teknik özellik bilgileri, maskenin tedavi cihazıyla uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi amacıyla klinikteki uzmana sağlanmıştır. Belirtilen teknik özellikler haricinde kullanıldığında, maskenin sızdırmazlığı ve rahatlığı etkili olmayabilir, optimum tedaviye ulaşılamayabilir ve kaçak hızındaki farklılık veya kaçaklar cihazın çalışmasını etkileyebilir.
- Maske üzerinde biriken kirin ve yağın bulaşmasını önlemek için maske her iki günde bir temizlenmelidir.
- Maske tavsiye edilmeyen temizlik veya dezenfektasyon yöntemleriyle temizlenmemelidir.
- Kullanıcı maskeyi takmadan önce yüzünü temizlemelidir.
- Hasta maskenin yapısıyla oynamamalıdır.
- Maskeyi kurutma makinesine atmayın.

Kontraendikasyonlar

- Yok

Teknik özellikler

1. Tedavi Edilen Basınç Aralığı: 4 ila 20 cmH₂O
2. 22mm firdöndü bağlantısı
3. Direnç (basınç düşüşü)
@ 50 lpm = 0.4 cmH₂O
@ 100 lpm = 0.9 cmH₂O
4. Sabit Kaçak Hızı (hız imalatındaki özelliklere göre farklılık gösterebilir):

Basınç (cmH ₂ O)	4	5	10	15	20
Debi (lpm)	17	19	29	37	45

5. Doğa ile ilgili muhafaza ve çalışma şartlarının bu cihazın çalışma biçimini etkilemesi beklenmemektedir.
6. Ses Seviyesi
 - A-ağırlıklı Ses Gücü Seviyesi, 26 dBA
 - A-ağırlıklı Ses Basıncı Seviyesi @ 1m, 18 dBA
7. Bu cihazın normal kullanım ve temizlik koşulları altında en az 90 gün boyunca düzgün işlev göstermesi beklenmektedir.
8. Bu cihaz doğan kauçuk lateks kullanılarak üretilmemiştir.

Sınırlı Garanti www.circadiance.com/help



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands



0459

Circadiance ürünlerine dair ticari markalar ve patentler için, lütfen, www.circadiance.com/IP adresini ziyaret edin.

101669 REV 2



SleepWeaver.
Soft Cloth Masks

Advance small

Kullanım Talimatları


Türkçe

Kullanım Amacı

Bu SleepWeaver Maske, Sürekli Pozitif Solunum Yolu Basıncı (CPAP) ve iki seviyeli tedaviye yöneliktir. Sadece tek bir hasta tarafından evde, hastanede ve benzeri tıbbi kurumlarda kullanılabilir. Maskeyi 30 kilogramdan daha ağır olan hastalar kullanmalıdır.



Maskenin Kullanıma Hazırlanması

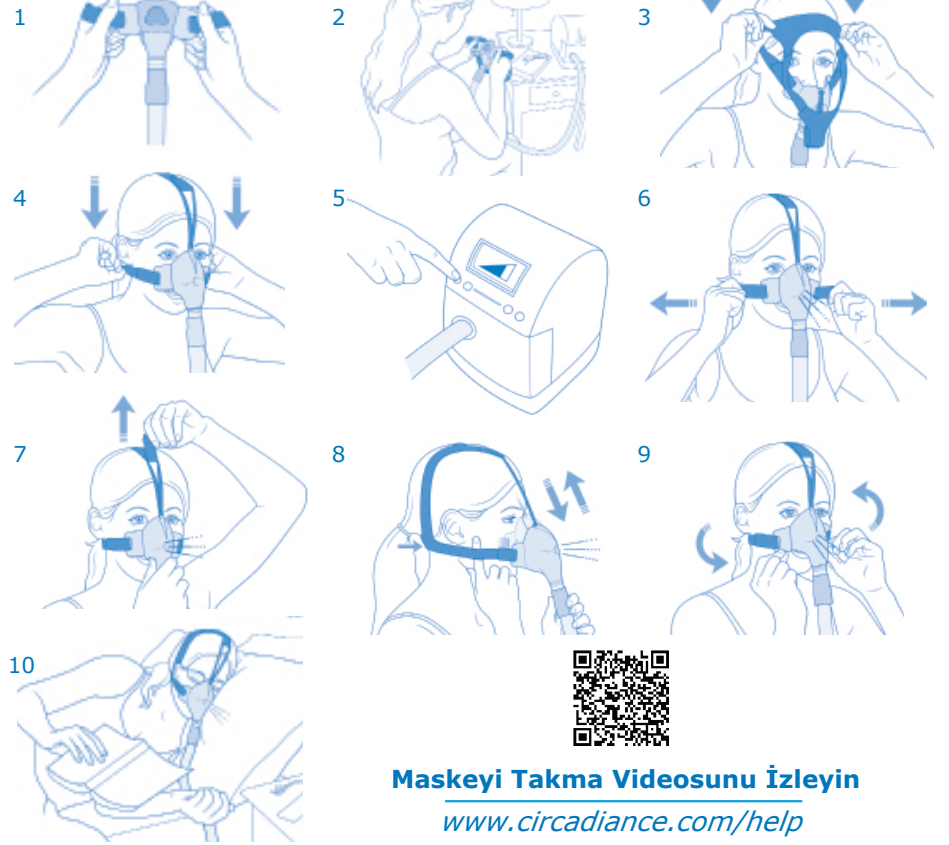

Maskeyi Takma Videosunu İzleyin

www.circadiance.com/help



E-posta Adresi: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235
İkamet Edilen Adres: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145
Telefon: 888-825-9640 or +1 724-858-2837
cservice@circadiance.com www.sleepweaver.com

Maskeyi Takma, Devam

1. Maskeyi ambalajından çıkarın. Maskenin başlığını çıkardıysanız, maskenin kanatlarında bulunan yarıklardan başlığın kayışlarını geçirin (1. resim). Makineden çıkan boruyu maskenin önünde bulunan plastik yuvaya bağlayın.
2. Başlığı kafanızdan geçirerek maskeyi takın. Maske burnunuzun üstüne başlığın kayışları ise alnınızın üstüne gelmelidir (2. ve 3. resimler).
3. Başlığı boyun kayışı kulaklarınızın arkasına gelinceye dek kafanızın arkasına geçirin (4. resim).
4. Makineyi açın (5. resim).
5. İlk önce boyun kayışını ayarlayın. Maskenin alt tarafı üst dudağınıza hemen burun deliklerinin altına düzgünce oturmalıdır (6. resim).
6. Kafa kayışını ayarlayarak maskenin burnunuza düzgünce oturmasını sağlayın (7. resim).
7. Başlık aşırı sıkı olmamalıdır; başlık kayışlarının her birinin altına bir parmak kolayca girmelidir (8. resim).
8. Olağan uyku pozisyonunda yatın ve gerekirse, maskeyi sağa sola çekiştirin. Maske bezi teninize yapışmalıdır (9. ve 10. resimler). Öteki talimatlar aşağıdaki bölümde bulunabilir. www.circadiance.com/help adresinden ayrıntılı maske takma videosu izlenebilir.

Sızıntıların Giderilmesi - Herhangi bir sızıntı olması durumunda bu talimatları uygulayınız:

1. CPAP veya bilevel cihazınız açık ve gerekli basınca sahip durumdayken, maskeyi burnunuz üzerine gelen kısımdan tutun ve hafifçe yüzünüzden çekin, ayak uçlarınıza doğru aşağı yönlendirin ve yerine hafifçe bırakın.
2. Maskenin kenarından herhangi bir sızıntı olması durumunda ise, Ense Kayışını başlıktan çıkarınız, maskeyi sıkılaştırmak için kayışları dışa doğru çekiniz ve kayışı yeniden başlığa geçiriniz.
3. Gözünüze herhangi bir sızıntı gelmesi durumunda, Başlığı düzeltiniz.
4. Sızıntı olması ve daha rahat bir kullanım ihtiyacı doğması durumunda bazen maskeyi hafifçe gevşetip 1. Adımda anlatılan talimatları yerine getirebilirsiniz.
5. Başlık kayışlarının çok sıkı veya çok gevşek olması durumunda da sızıntılar meydana gelebilir. Ürünü birkaç kere kullandıktan sonra kendiniz için en uygun kullanım şeklini bulacaksınız.

Evde Temizleme Talimatları - Kişisel Kullanım

1. İki günde bir ılık suyla ve aşındırıcı nitelikte olmayan, hafif sabunla maskeyi elde yıkayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan maskeyi kurutun.
2. Haftada bir başlığı elde yıkayın.
3. Bağlantı pimini bağlayan tıbbi bant belirli bir süre kullandıktan sonra yapışkan özelliğini kaybedeceğinden yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
4. Bağlantı pimi maskeye, lateks içermeyen beyaz tıbbi bant ile tutturulur. Bağlantı pimini yerinden çıkarıp 1/3 oranında sirkeli suda (1 fincan suya, 1/3 oranında sirke katarak) ayrı bir şekilde temizleyebilirsiniz.
5. Bağlantı pimini sirkeli suda beklettikten sonra iyice durulayarak kurumaya bırakınız.
6. Kuruduktan sonra bağlantı pimini lateks içermeyen tıbbi bant ile yerine tutturunuz. (daha fazla bilgi için Bağlantı Pimi bölümüne bakınız).

Maskenin Çıkarılması

1. SleepWeaver'i çıkarmak için maskeyi burnunuzdan kaldırın ve başlık kısmını çıkarın.
2. Başlık parçasının kayışlarını gevşetmenize gerek yoktur. Birkaç kere pratik yaptıktan sonra kendinize en uygun ayarı bularak maskeyi kolaylıkla takıp çıkarabilirsiniz.

Bağlantı Piminin Çıkarılması - Kronik bir hastalığınız yoksa, doktorunuz tarafından bu şekilde talimat verilmediyse ya da maske Uykü Laboratuvarında kullanılmıyorsa, maskenin her yıkandığında bağlantı piminin çıkarılmasına ve bandın yenilenmesine gerek yoktur.

1. Bağlantı pimini maskeye tutturmaya yarayan beyaz tıbbi bandı ortaya çıkarmak için maskeyi ters yüz edin ve eski bandı çıkarın.
2. Temizlemek için bağlantı pimini hortum deliğinden dışarı doğru ittirin ve maskeden ayırın.
3. Maskeyi yukarıda anlatılan talimatlar doğrultusunda temizleyiniz.
4. Bağlantı pimini 1/3 oranında sirkeli suda ayrı bir şekilde temizleyiniz. Sirkeli sudan çıkardıktan sonra iyice durulayınız ve kurumaya bırakınız.

Bağlantı Piminin yerine takılması- Lateks içermeyen, su geçirmez özellikte beyaz tıbbi bant kullanın

1. Bağlantı pimi ve maske tamamen kuruduktan sonra maskeyi ters yüz edin.
2. Bağlantı pimini, "erkek" (sırt) tarafı kumaşın dışına yaklaşık 1.25 cm dışarı çıkacak şekilde maskenin içine yerleştiriniz.
3. Lateks içermeyen tıbbi banttan yaklaşık 27 cm'lik bir parça kesiniz.
4. Bir elinizle bağlantı pimini maskenin içinde tutarken bandı erkek bağlantı parçasının üzerine sarmaya başlayınız. Bandın hem kumaştan hem de bağlantı piminden yaklaşık 1 cm yukarıda olmasını sağlayınız.
5. Bandı bağlantı pimi ve maskenin etrafına en az 3 defa dolayınız.
6. Banttan arta kalan miktarı kesebilir ve meydana gelen kırışıklıkları parmaklarınızla düzeltebilirsiniz.
7. Bu talimatları aynı zamanda web sitemizde de bulabilirsiniz: www.circadiance.com/help



⚠ Uyarılar

- Bu cihaz havalandırılmalı bir maskedir ve çift yönlü solunum devresiyle birlikte kullanılmamalıdır.
- Maskenin veya başlığın herhangi bir parçasına karşı reaksiyonlar gelişirse, maskeyi kullanmayı derhal bırakın.
- Tedavi cihazı açılıp düzgün çalışır halde olmadıkça, bu sistem kullanılmamalıdır.
- Havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Maskenin düzgün takıldığından emin olun. Maskenin ve başlığın bu talimat broşürünün ön yüzünde gösterilen şekilde birleştirildiğinden ve takıldığından emin olun.
- Cihazın parçalarından birisinde gözle görülür bir kusur (çatlak, kırık parça, yarılma vs.) varsa veya parçaları temizlikten sonra bile temiz değilse, söz konusu parça atılmalıdır ve yenisi takılmalıdır.
- Bu talimatlarda belirtilenden farklı bir yöntem, temizlik maddesi ile veya farklı bir sıklıkta cihazı temizlemek maske üzerinde ters etkilere sebep olabilir ve nihayetinde tedavinin kalite ve güvenliğini etkileyebilir.
- Maska oksijen takviyesi ile kullanılıyorsa, oksijen akışı makinenin olmadığı durumlarda kesilmelidir, zira biriken oksijen yangın tehlikesi oluşturur.
- Maske oksijen takviyesi ile kullanılıyorsa, hasta sigaradan uzak durmalıdır.
- Bu ürünü tek bir hasta üst üste kullanabilir. Klinik ortamda tekrar (temizleme ve dezenfektasyon yöntemleri) işleminden geçirilmemelidir. Hem evde hem de klinik ortamda yalnızca bu talimatlarda belirtilen temizlik yöntemleri kullanılmalıdır.