

Предпазни мерки

- За подробна информация относно настройките и работата на устройството вижте ръководството на терапевтичното устройство.
- Предоставени са техническите спецификации на маската, за да може вашият лекар да провери дали са съвместими с терапевтичното устройство. Ако се използват извън спецификациите, уплътнението и удобството на маската може да не бъдат ефективни, може да не бъде постигната оптимална терапия, а утечка или промяна в скоростта на потока може да засегнат функционирането на устройството.
- Маската трябва да се почиства през ден, за да се предотврати натрупването на мръсотия и омазняване от кожата по маската.
- Върху маската не трябва да се прилагат други методи за почистване и дезинфекциране освен одобрените.
- Потребителят трябва да почиства лицето си, преди да постави маската.
- Забранено е извършването на промени по конструкцията на маската.
- Не сушете маската в сушилна за дрехи.

Противопоказания

- Няма

Технически спецификации

1. Терапевтичен обхват на налягането: 4 до 20 cmH₂O
2. дължина на връзката на шарнирното съединение 22 mm
3. Съпротивление (спад в налягането)
@ 50 lpm = 0.4 cmH₂O
@ 100 lpm = 0.7 cmH₂O
4. Фиксирана скорост на потока (дебитът може да варира в зависимост от производствените разновидности):

Налягане (cmH ₂ O)	4	5	10	15	20
Дебит (lpm)	14	16	27	37	45

5. Не се очаква начинът на съхранение и условията, в които се използва, да засегнат функционирането на това устройство.
6. Ниво на шума
 - А-претеглено ниво на шума при включено захранване, 27 dBA
 - А-претеглено ниво на шума при осъществяване на налягане @ 1m, 19 dBA
7. Това устройство се очаква да бъде годно за употреба при нормални условия на експлоатация и почистване за период от най-малко 90 дни.
8. Това устройство не е изработено от естествен каучуков латекс.

Ограничена гаранция www.circadiance.com/help



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands



0459

За приложимите към продуктите на Circadiance патенти и търговски марки посетете www.circadiance.com/IP

100698 REV 5



SleepWeaver
Soft Cloth Masks


Élan[®]

Инструкции за употреба **Български**


Предназначение

Маската SleepWeaver е предназначена да осъществява интерфейсна връзка за непрекъснато положително налягане в дихателните пътища (CPAP) или двустепенна терапия. Тази маска е предназначена за многократна употреба при един пациент в домашни условия или многократно използване от различни пациенти в болнична среда. Тази маска следва да се използва при пациенти с тегло над 66 lbs (30 kg).

Ориентация на маската

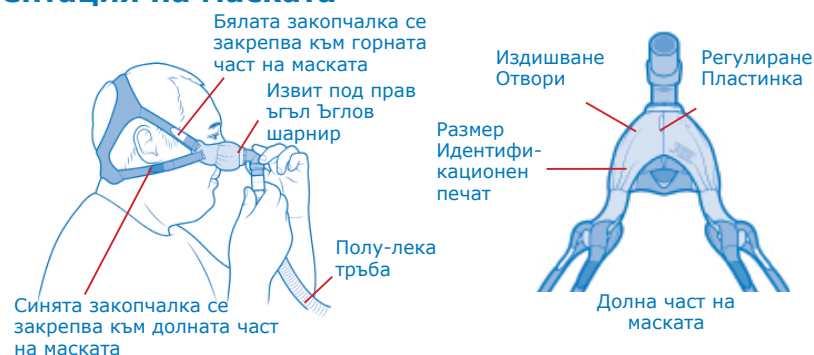

Поставяне на маска

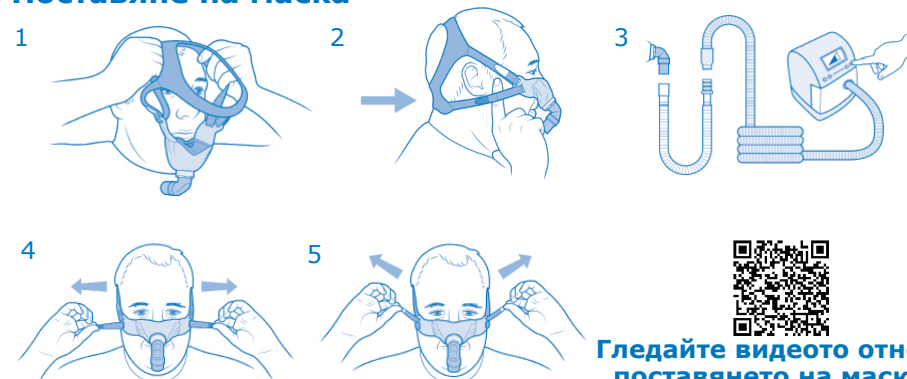

Гледайте видеото относно поставянето на маската
www.circadiance.com/help




Адрес за кореспонденция: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235
Физически адрес: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145
Телефон: 888-825-9640 or +1 724-858-2837
cservice@circadiance.com www.sleepweaver.com

Поставяне на маската, продължение

1. Поставете маската върху лицето си, като нахлузите приспособлението за закрепване върху главата си.
2. Опората за врата на приспособлението за закрепване към главата трябва да стои удобно върху долната част на врата ви. **НЕ ПРИТЯГАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО СИЛНО КАИШКИТЕ. ПЪРВОНАЧАЛНО ГИ ОСТАВЕТЕ В ХЛАБАВО ПОЛОЖЕНИЕ И СЛЕД ТОВА ГИ ПРИТЕГНЕТЕ КОЛКОТО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СТЕГНЕТЕ ХЕРМЕТИЧНО МАСКАТА.**
3. Регулирайте долните каишки (синята закопчалка), за да разположите комфортно маската върху носа си. Малка част от черната тъкан ще се покаже когато маската се използва.
4. Регулирайте горните каишки (бялата закопчалка), така че долната част на маската да се разположи удобно върху кожата точно под ноздрите ви.
5. Закрепете полу-леката тръба към извития под прав ъгъл шарнир, след това към дългата 1,80 метра тръба, която се свързва към вашата машина за осигуряване на постоянно позитивно налягане във въздушните пътища или към двустепенната машина, и след това включете машината.
6. Легнете в обичайната си поза за сън и ако е необходимо, завъртете маската така че платът да уплътнява добре мястото към кожата. В следващия раздел са дадени допълнителни съвети за прикрепяне, а подробно видео за поставяне на маската може да видите на www.circadiance.com/help.

Нагласяне при утечки - Ако се наблюдават утечки, опитайте тези стъпки:

1. Внимателно притегнете каишките на много ситни стъпки, за да постигнете херметично уплътнение.
2. Наместете маската, като я дърпате наляво, надясно, нагоре и надолу. Използвайте регулиращата пластинка върху долната част на маската по време на този процес.

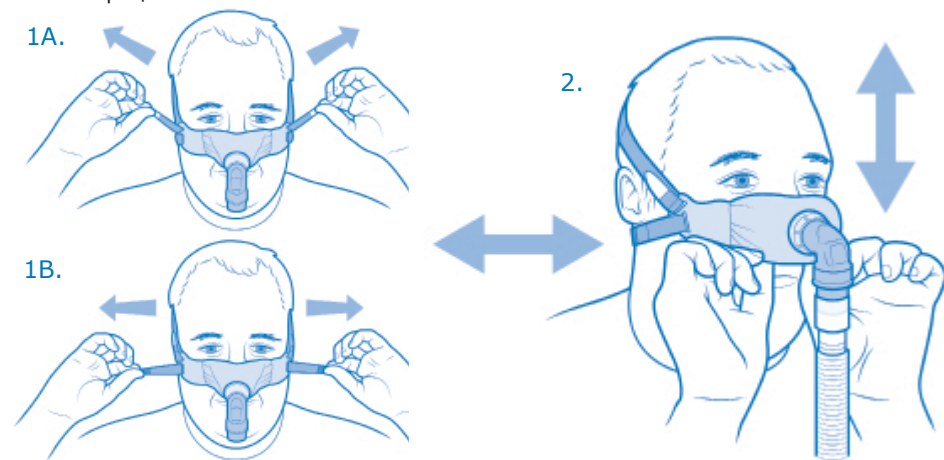

Почистване на маската в домашни условия

- Вашата маска SleepWeaver Elan трябва да бъде измивана през ден на ръка със слаб разтвор на неабразивен сапун в топла вода. Не използвайте гореща вода. Измивайте, докато маската не придобие чист вид.
- Изплакнете добре с питейна вода и оставете да изсъхне на въздуха извън пряка слънчева светлина.
- Можете да оставите извития под прав ъгъл шарнир закрепен по време на почистване или можете да го свалите и да го почистите отделно.
- Измивайте на ръка приспособлението за закрепване към главата ежеседмично.

Почистване и дезинфекциране между отделните пациенти

- Моля, посетете www.circadiance.com/help за инструкции.

Прикрепване на маската към приспособлението за закрепване към главата

1. Плъзнете „Белите“ закопчалки през горните прорези на меката подложка.
2. Плъзнете „Сините“ закопчалки през долните прорези на меката подложка.

Закрепване на извития под прав ъгъл шарнир към меката подложка

1. Плъзнете „Резбовия“ детайл през отвора отвътре на маската.
2. Поместете „Шайбата“ върху „Резбовия“ детайл.
3. Уверете се, че тъканта не се набира върху резбовия детайл.
4. Завийте „Гайката“ върху „Резбовия“ детайл.



Закрепване на въжената каишка към приспособлението за закрепване към главата

1. Закрепете „Въжената каишка“ към полу-леката тръба и към горната част на приспособлението за закрепване към главата, за да подпомогнете боравенето с тръбата, ако тръбата бъде насочена над главата ви.
2. Уверете се, че „Въжената каишка“ не е усукана при закрепването ѝ.



⚠️ предупреждения

- Това устройство представлява вентилирана маска и не трябва да се използва с разклонена линия за обдишване.
- Ако се появят каквито и да е реакции към някоя от частите на маската или приспособлението за закрепване към глава, незабавно преустановете употреба.
- Тази система не трябва да се използва, докато не бъде установено, че терапевтичното устройство е включено и работи правилно.
- Отворите за вентилиране не трябва да бъдат блокирани.
- Уверете се, че маската е поставена правилно. Уверете се, че маската и приспособлението за закрепване към глава са свързани и поставени, както е показано на първа страница от настоящите инструкции.
- Ако са налице някакви видими повреди на компонент от системата (напуквания, счупени части, разкъсвания и др.), или ако след почистване някоя от частите не може да бъде добре почистена, съответният компонент следва да бъде изхвърлен и подменен.
- Ако почиствате продукта по различен от подробно обяснения в настоящите инструкции начин (честота, метод и използвано почистващо средство), това може да има неблагоприятен ефект върху маската и впоследствие върху безопасността и качеството на терапията.
- Ако маската се използва с допълнителен кислород, подаването на кислород трябва да бъде спряно, ако машината не работи, защото при натрупването му се появява опасност от пожар.
- Ако маската се използва с допълнителен кислород, пациентът трябва да се въздържа да не пуши.