

Waarschuwingen

- Raadpleeg de handleiding van uw therapieapparaat voor details over instellingen en gebruiksinformatie.
- De technische specificaties van het masker zijn bedoeld voor uw arts om na te gaan of deze compatibel zijn met het therapieapparaat. Als de specificatie niet wordt gevolgd, kunnen de afdichting en het comfort van het masker niet effectief zijn, kan een optimale therapie niet worden bereikt en kan een verschillende leksnelheid de functie van het apparaat beïnvloeden.
- Het masker moet elke dag worden gereinigd om te voorkomen dat vuil en olieverontreiniging van de huid op het masker wordt opgehoopt.
- Het masker mag niet worden gereinigd met niet-goedgekeurde reinigings- of ontsmettingsmethoden.
- De gebruiker moet hun gezicht reinigen voordat het masker wordt gedragen.
- De patiënt mag het design van het masker niet wijzigen.
- Plaats het masker niet in een wasdroger.

Contra-indicaties

- Geen

Technische Specificaties

1. Therapiedrukbereik: 4 to 20cmH₂O
2. Wartelverbinding van 22 mm
3. Weerstand (drukval)
@ 50 lpm = 0.4 cmH₂O
@ 100 lpm = 0.7 cmH₂O
4. Vaste leksnelheid (de stroomsnelheid kan variëren door fabricagevariatie):

Druk (cmH ₂ O)	4	5	10	15	20
Stroomsnelheid (lpm)	14	16	27	37	45

5. Er wordt niet verwacht dat milieuopslag en gebruiksomstandigheden de werking van dit apparaat beïnvloeden.
6. Geluidsniveau
 - A-gewogen geluidsvermogensniveau, 27 dBA
 - A-gewogen geluidsdrumniveau @ 1m, 19 dBA
7. Verwacht mag worden dat dit apparaat geschikt blijft voor gebruik onder normale gebruiks- en reinigingsomstandigheden gedurende een periode van minstens 90 dagen.
8. Het apparaat is niet gemaakt van natuurlijke rubberlatex.

Beperkte garantie www.circadiance.com/help



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands



0459

Voor octrooien en handelsmerken die van toepassing zijn op producten van Circadiance, gaat u naar www.circadiance.com/IP

100678 REV 5



SleepWeaver
Soft Cloth Masks

Élan[®]

Gebruiksaanwijzingen


Nederlands

Beoogd gebruik


Dit masker van SleepWeaver is bedoeld om een raakvlak te geven voor continu positieve ademwegdruk of biniveautherapie. Dit masker is bestemd voor hergebruik bij een enkele patiënt thuis en bij meerdere patiënten in het ziekenhuis/institutionele omgeving. Dit masker dient gebruikt te worden bij patiënten die minder wegen dan 30 kg (66 lbs).



Positie van het masker

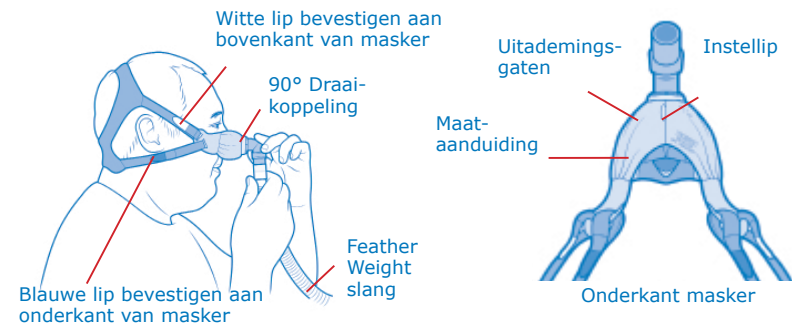

Masker opzetten

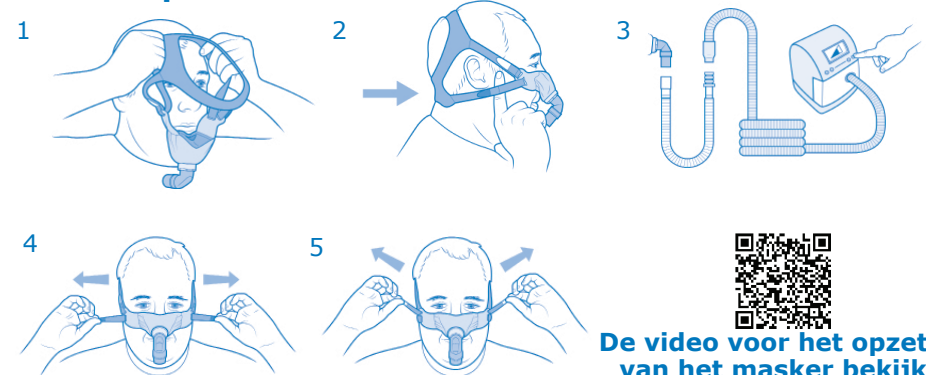

De video voor het opzetten van het masker bekijken
www.circadiance.com/help




Postadres: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235
Fysiek adres: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145
Telefoon: 888-825-9640 or +1 724-858-2837
cservice@circadiance.com www.sleepweaver.com

Het masker bekijken, vervolg

1. Zet het masker op door de hoofdbandset over uw hoofd te trekken.
2. De neksteun van de hoofdbandset moet prettig op het onderste deel van uw nek zitten. **BELANGRIJK – TREK DE BANDEN NIET TE STRAK AAN. HOUD DE BANDEN IN HET BEGIN LOS EN TREK ZE DAN WAAR NODIG AAN VOOR EEN LUCHTDICHTE AFDICHTING.**
3. Stel de onderste banden (met blauwe lipjes) zodanig af dat het masker comfortabel tegen uw neus komt te zitten. Bij gebruik van het masker wordt een klein stukje zwarte stof zichtbaar.
4. Stel eerst de bovenste banden (met witte lipjes) zodanig af dat de onderkant van het masker comfortabel op uw bovenlip rust, vlak onder uw neusgaten.
5. Bevestig de Feather Weight slang aan de 90° draaikoppeling en dan aan de slang van 183 cm (6 ft) die aan uw CPAP- of bi-levelapparaat vastzit. Zet het apparaat aan.
6. Ga liggen in uw normale slaappositie en indien nodig verschuift uw het masker, zodat de stof volledig op uw huid rust. Extra aanpassingstips zijn in het volgende gedeelte te vinden en u kunt een gedetailleerde video voor het opzetten van het masker bekijken op www.circadiance.com/help.

Afstellen bij lekken - Probeer bij lekkage deze stappen:

1. Trek de banden voorzichtig telkens een klein stukje aan voor een goede afdichting.
2. Beweeg het masker naar links en rechts en op en neer om het goed aan te brengen. Bij deze procedure kunt u de instelling aan de onderkant van het masker gebruiken om u te helpen.

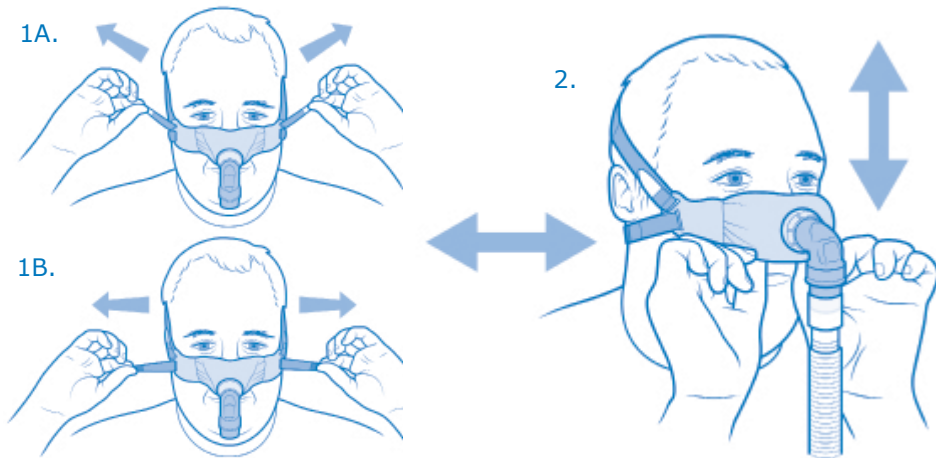

Masker thuis reinigen

- Uw SleepWeaver Elan moet elke dag met de hand worden gewassen met een mild, niet-schurend reinigingsmiddel in warm water. Gebruik nooit heet water. Herhaal het wassen tot het masker zichtbaar schoon is.
- Spoel hem goed uit met drinkwater en laat hem buiten direct zonlicht aan de lucht drogen.
- U kunt de 90° draaikoppeling tijdens het reinigen eraan laten zitten of hem verwijderen en apart reinigen.
- Was de hoofdbandset elke week met de hand.

Reinigen en ontsmetten na elke patiënt

- Ga naar www.circadiance.com/help voor instructies.

Masker aan hoofdbandset bevestigen

1. Steek de witte lipjes door de bovenste gleuven van het kussentje.
2. Steek de blauwe lipjes door de onderste gleuven van het kussentje.


90° draaikoppeling aan maskerkussentje bevestigen

1. Schuif het onderdeel met schroefdraad van binnen uit het masker door de opening.
2. Breng de sluitring aan over het onderdeel met schroefdraad.
3. Zorg ervoor dat de stof niet omhoog schuift over het onderdeel met schroefdraad.
4. Schroef het moerdeel op het onderdeel met schroefdraad.



Slanggeleider aan hoofdbandset bevestigen

1. Bevestig de slanggeleider aan de Feather Weight slang en aan de bovenkant van de hoofdbandset om de slang op zijn plaats te helpen houden als hij over uw hoofd loopt.
2. Zorg ervoor dat de slanggeleider niet wordt verdraaid bij het bevestigen.

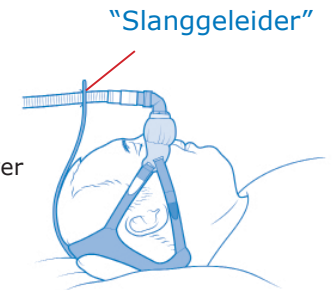

⚠ Waarschuwingen

- Het apparaat is een geventileerd masker en mag niet worden gebruikt met een bilineair ventilatiecircuit.
- Als er bijwerkingen optreden die veroorzaakt worden door een onderdeel van dit masker of deze hoofduitrusting, stopt u het gebruik ervan onmiddellijk.
- Dit systeem mag niet worden gebruikt, tenzij het therapieapparaat is ingeschakeld en juist werkt.
- De ventilatiegaten mogen nooit geblokkeerd worden.
- Zorg ervoor dat het masker juist is opgezet. Zorg ervoor dat het masker en de hoofduitrusting juist gemonteerd en gepositioneerd zijn zoals aangegeven op de voorpagina van deze instructies.
- Als er zichtbare gebreken van een systeemonderdeel zichtbaar zijn (barsten, gebroken onderdelen, scheuren, enz.) of als de onderdelen na het reinigen niet proper zijn, moet het onderdeel worden weggegooid en vervangen.
- Als de periodiciteit, de methode of het reinigingsmiddel waarmee dit product wordt gereinigd anders is dan deze die in deze instructies wordt omschreven, kan dit een nadelige invloed hebben op het masker en bijgevolg de veiligheid of kwaliteit van de therapie.
- Als het masker wordt gebruikt met aanvullende zuurstof, moet de zuurstofstroom uitgeschakeld zijn als het apparaat niet werkt, omdat opgehoopte zuurstof tot brandgevaar leidt.
- Als het masker wordt gebruikt met aanvullende zuurstof, mag de patiënt niet roken.