

Upozornenie

- Podrobnosti o nastavení a prevádzkové údaje nájdete a príručky k terapeutickému pomôcku.
- Technické parametre masky sú určené pre vášho klinického pracovníka, ktorý overí, či zodpovedajú parametrom terapeutického prístroja. Ak sa maska používa mimo špecifikácie, utesnenie a komfort používania masky nemusia byť efektívne, môže sa stať, že sa nedosiahne optimálna liečba a únik alebo zmeny úniku môžu mať vplyv na funkčnosť pomôcky.
- Masku sa musí čistiť každý deň, aby sa na maske nehromadili nečistoty a mastnoty z pokožky.
- Masku sa nesmie čistiť neschválenými čistiacimi alebo dezinfekčnými postupmi.
- Používateľ by si mal pred použitím masky umyť tvár.
- Pacient nesmie upravovať konštrukciu masky.
- Neumiestňujte masku do sušičky na prádlo.

Kontraindikácie

- Žiadne

Technické špecifikácie

1. Terapeutický tlakový rozsah: 4 až 20 cm H₂O
2. 22mm otočný konektor
3. Odpor (pokles tlaku)
 - @ 50 lpm = 0.4 cmH₂O
 - @ 100 lpm = 0.7 cmH₂O
4. Fixný únik (prietok sa môže líšiť kvôli odchýlkam vo výrobe):

Tlak (cmH ₂ O)	4	5	10	15	20
Prietok (lpm)	14	16	27	37	45

5. Prostredie uskladnenia a prevádzkové podmienky by nemali mať vplyv na funkčnosť tejto pomôcky.
6. Hladina hluku
 - A vážená hladina akustického výkonu, 27 dBA
 - A vážená hladina akustického tlaku @ 1m, 19 dBA
7. Táto pomôcka by si pri štandardných podmienkach používania a čistenia mala zachovať vlastnosti vhodné na použitie po dobu najmenej 90 dní.
8. Pri výrobe pomôcky nebol použitý prírodný latex.

Obmedzená záruka www.circadiance.com/help



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands



0459

Informácie o patentoch a ochranných známkach vzťahujúcich sa na výrobky Circadiance nájdete na stránke www.circadiance.com/IP

100774 REV 5



SleepWeaver
Soft Cloth Masks

Élan[®]

Návod na použitie

Slovenčina

Určené použitie


Táto maska SleepWeaver je určená na zabezpečenie pripojenia pre terapiu s kontinuálnym pretlakom v dýchacích cestách (CPAP), resp. „bi-level“ (dvojúrovňovú terapiu). Táto maska je určená na opakované použitie u jedného pacienta v domácom prostredí a u viacerých pacientov na opakované použitie v nemocničnom/inštitucionálnom prostredí. Táto maska je určená na použitie u pacientov ťažších než 66 lb (30 kg).



Orientácia masky



Nasadenie masky

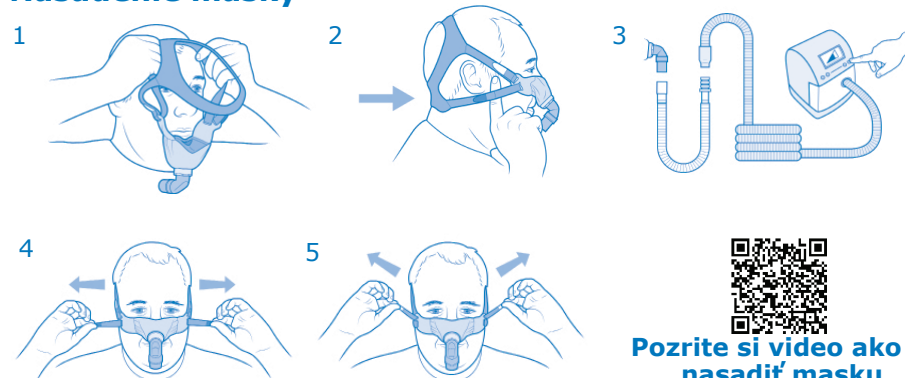

Pozrite si video ako si nasadiť masku

www.circadiance.com/help




Poštová adresa: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235
Fyzická adresa: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145
Telefón: 888-825-9640 or +1 724-858-2837
cservice@circadiance.com www.sleepweaver.com

Nasadenie masky

1. Nasadte si masku tak, že si na hlavu natiahnete náhlavnú súpravu.
2. Krčná opierka náhlavnej súpravy by mala pohodlne dosadať na spodnej časti v ášho krku. **Dôležité - nedotahujte popruhy nadmernou silou. začnite s voľnými popruhmi až potom ich podľa potreby dotiahnite aby ste dosiahli vzduchotesné utesnenie.**
3. Nastavte spodné (modré háčiky) popruhy tak aby maska pohodlne dosadla na váš nos. Počas používania masky sa objaví malé množstvo čiernej látky.
4. Najprv nastavte horné popruhy (s bielymi háčikmi), tak aby bola spodná časť masky pohodlne opretá nad vašou hornou perou tesne pod nosovými dierkami.
5. Pripojte trubicu Feather Weight Tube na 90° otočné koleno a potom na 6-stopovú (cca 1,6 m) trubicu, ktorá sa pripája na vaše CPAP, alebo Bi-Level zariadenie a zapnite zariadenie.
6. Ľahnite si do polohy, v ktorej normálne spíte a ak to bude potrebné, posuňte si masku tak, aby látka tesne dosadla na pokožku. Ďalšie tipy na nastavenie nájdete v nasledujúcej časti a podrobné video nájdete na www.circadiance.com/help.

Nastavenie pri netesnosti - ak zistíte netesnosť, vyskúšajte tieto kroky:

1. Jemným pritiahnutím popruhov po malých krokoch zabezpečte utesnenie.
2. Pokývte maskou doľava a doprava a hore a dolu tak aby dosadla na miesto. Počas toho si môžete pomôcť nastavovacím uškom na spodnej časti masky.

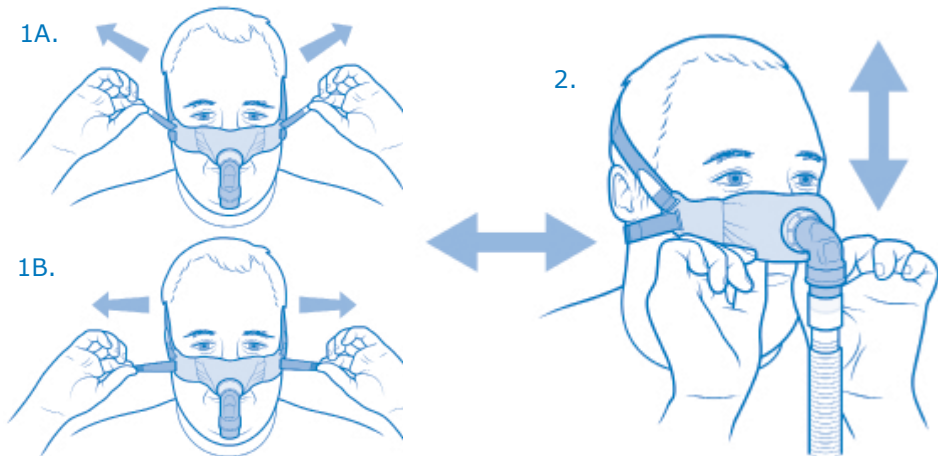

Čistenie masky v domácom prostredí

- SleepWeaver Elan sa má každý druhý deň umývať ručne, s použitím jemného, neabrazívneho mydla, v teplej vode. Nikdy nepoužívajte horúcu vodu. Umývajte dovtedy, kým maska nie je viditeľne čistá.
- Dôkladne opláchnite pitnou vodou a nechajte vyschnúť na vzduchu mimo priameho slnečného svetla.
- 90° otočné koleno môžete počas čistenia nechať pripojené, alebo ho môžete odpojiť a očistiť oddelene.
- Jemne ručne opláchnite náhlavnú súpravu.

Čistenie a dezinfekcia medzi rôznymi pacientami

- Pokyny nájdete na www.circadiance.com/help.

Pripojte masku k náhlavnej súprave

1. Pretiahnite „Biele“ háčiky cez horné štrbiny na vankúši.
2. Pretiahnite „Modré“ háčiky cez dolné štrbiny na vankúši.

Pripojte 90° otočné koleno na podušku masky

1. „Závitovú“ časť pretiahnite cez otvor zvnútra masky.
2. „Podložku“ natiahnite na „Závitovú“ časť.
3. Skontrolujte či sa nevyhrnula látková časť na pevliekaciu časť.
4. Na „Závitovú“ časť nasadte „maticovú“ časť.



Na náhlavnú súpravu upevnite úväzový popruh

1. Pripojte „úväzový popruh“ na trubicu Feather Weight Tube a na hornú časť náhlavnej súpravy aby sa ľahšie ovládala trubicu nad hlavou.
2. Skontrolujte či nie je prekrútený „úväzový popruh“ po pripojení.



⚠ Výstrahy

- Pomôcka je ventilovaná maska a nemala by sa používať s dvojvetvovým ventilačným okruhom.
- Ak vzniknú akékoľvek reakcie na ktorúkoľvek časť tejto masky alebo hlavových popruhov, okamžite ju prestaňte používať.
- Tento systém sa nesmie používať pokiaľ sa nezapne a správne nefunguje terapeutické zariadenie.
- Ventilačné otvory sa nikdy nesmú blokať.
- Skontrolujte, či je maska správne nasadená. Skontrolujte, či sú maska a náhlavné popruhy zastavené a nastavené tak, ako je vidieť na prednej strane týchto pokynov.
- Ak je zrejme akékoľvek viditeľné poškodenie komponentov (prasknuté, zlomené diely, trhliny, atď.), alebo ak po vyčistení zostanú ktorékoľvek komponenty nevyčistené, komponent sa musí zlikvidovať a vymeniť.
- Zmena frekvencie, spôsobu, alebo čistiaceho prostriedku používaného na čistenie tohto produktu v porovnaní s týmito pokynmi môže mať nežiaduci účinok na masku a následne na bezpečnosť alebo kvalitu terapie.
- Ak sa maska používa s prídavným kyslíkom, keď je prístroj vypnutý, prívod kyslíka je potrebné vypnúť, pretože nahromadený kyslík predstavuje nebezpečenstvo požiaru.
- Ak sa maska používa s prídavným kyslíkom, pacient by nemal fajčiť.