

## Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Ayarlara ve kullanım bilgilerine dair ayrıntılar için tedavi cihazınızın kılavuzuna bakınız.
- Maskeye ait teknik özellik bilgileri, maskenin tedavi cihazıyla uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi amacıyla klinikteki uzmana sağlanmıştır. Belirtilen teknik özellikler haricinde kullanıldığında, maskenin sızdırmazlığı ve rahatlığı etkili olmayabilir, optimum tedaviye ulaşılamayabilir ve kaçak hızındaki farklılık veya kaçaklar cihazın çalışmasını etkileyebilir.
- Maske üzerinde biriken kirin ve yağın bulaşmasını önlemek için maske her iki günde bir temizlenmelidir.
- Maske tavsiye edilmeyen temizlik veya dezenfektasyon yöntemleriyle temizlenmemelidir.
- Kullanıcı maskeyi takmadan önce yüzünü temizlemelidir.
- Hasta maskenin yapısıyla oynamamalıdır.
- Maskeyi kurutma makinesine atmayın.

## Kontraendikasyonlar

- Yok

## Teknik özellikler

1. Tedavi Edilen Basınç Aralığı: 4 ila 20 cmH<sub>2</sub>O
2. 22mm firdöndü bağlantısı
3. Direnç (basınç düşüşü)  
@ 50 lpm = 0.4 cmH<sub>2</sub>O  
@ 100 lpm = 0.7 cmH<sub>2</sub>O
4. Sabit Kaçak Hızı (hız imalatındaki özelliklere göre farklılık gösterebilir):

Basınç (cmH <sub>2</sub> O)	4	5	10	15	20
Debi (lpm)	14	16	27	37	45

5. Doğa ile ilgili muhafaza ve çalışma şartlarının bu cihazın çalışma biçimini etkilemesi beklenmemektedir.
6. Ses Seviyesi
  - A-ağırlıklı Ses Gücü Seviyesi, 27 dBA
  - A-ağırlıklı Ses Basıncı Seviyesi @ 1m, 19 dBA
7. Bu cihazın normal kullanım ve temizlik koşulları altında en az 90 gün boyunca düzgün işlev göstermesi beklenmektedir.
8. Bu cihaz doğan kauçuk lateks kullanılarak üretilmemiştir.

**Sınırlı Garanti** [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20,  
2514 AP The Hague,  
The Netherlands



Circadiance ürünlerine dair ticari markalar ve patentler için,  
lütfen, [www.circadiance.com/IP](http://www.circadiance.com/IP) adresini ziyaret edin.

100687 REV 5



**SleepWeaver**  
Soft Cloth Masks

**Élan**<sup>®</sup>

**Kullanım Talimatları**


**Türkçe**

## Kullanım Amacı


Bu SleepWeaver Maske , Sürekli Pozitif Solunum Yolu Basıncı (CPAP) ve iki seviyeli tedaviye yöneliktir. Ayrıca, evde tek bir hasta tarafından ve hastanede ve benzeri kurumlarda birden fazla hasta tarafından bir kereden fazla da kullanılabilir. Maskeyi 30 kilogramdan daha ağır olan hastalar kullanmalıdır.



## Kullanım Amacı

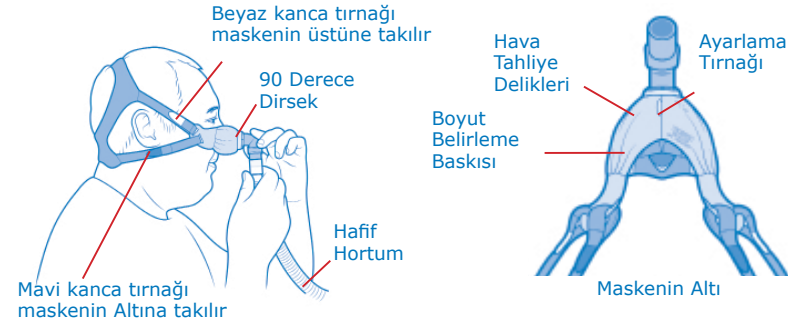

## Maskenin Kullanımı

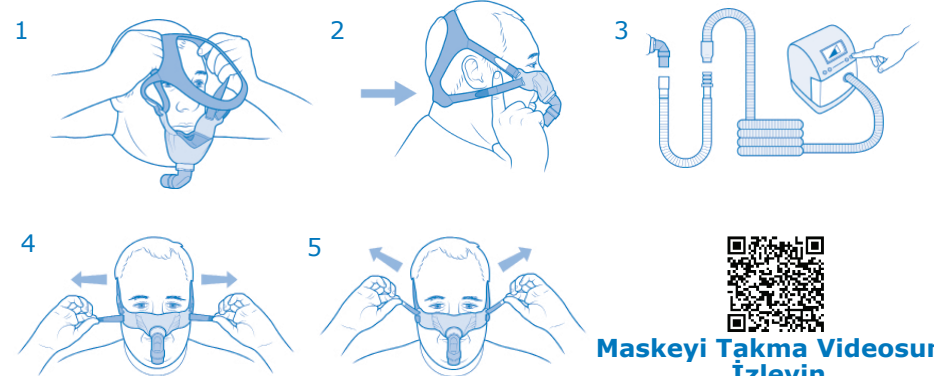

**Maskeyi Takma Videosunu İzleyin**

[www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)




E-posta Adresi: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235  
İkamet Edilen Adres: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145  
Telefon: 888-825-9640 or +1 724-858-2837  
cservice@circadiance.com [www.sleepweaver.com](http://www.sleepweaver.com)

## Maskeyi Takma, Devam

1. Başlığı başınızın üzerinden geçirerek maskeyi takın.
2. Başlık üzerindeki ense desteği ensenizin alt tarafında rahatsız etmeyecek şekilde du r malıdır. **ÖNEMLİ – KAYIŞLARI FAZLA SIKMAYIN. KAYIŞLAR GEVŞEKKEN TAKIN KAYIŞLARI MASKE HAVA GEÇİRMEYECEK HALE GELENE KADAR SIKIN.**
3. Masketi burnunuza rahat bir şekilde yerleştirmek için alttaki (mavi kanca tırnaklı) kayışları ayarlayın. Az miktarda siyah kumaş gördüğünüzde maskenin kullanımda olduğunu anlayabilirsiniz.
4. İlk önce maskenin alt kısmı burun deliklerinizin hemen altında, üst dudağınıza rahatça oturana dek üstteki (beyaz kanca tırnaklı) kayışları ayarlayın.
5. Hafif Hortumu ilk önce 90 derecelik dirseğe ardından CPAP ya da Bi-Level Makinenize bağlanan 6 fit (1,8 metre) uzunluğundaki boruya takın ve ardından makineyi çalıştırın.
6. Olağan uyku pozisyonunda yatın ve gerekirse, maskeyi sağa sola çekistirin. Maske bezi teninize yapışmalıdır. Öteki talimatlar aşağıdaki bölümde bulunabilir. [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help) adresinden ayrıntılı maske takma videosu izlenebilir.

## Sızıntı Halinde Ayarlama - Sızıntı olursa bu adımları deneyin:

1. Tam sızdırmazlık elde etmek için kayışları hafifçe küçük aralıklarla sıkın.
2. Maskeyi sağa sola, yukarı aşağıya oynatarak yerine oturtun. Bu işlem esnasında maskenin altındaki ayarlama tırnağı da kullanılabilir.

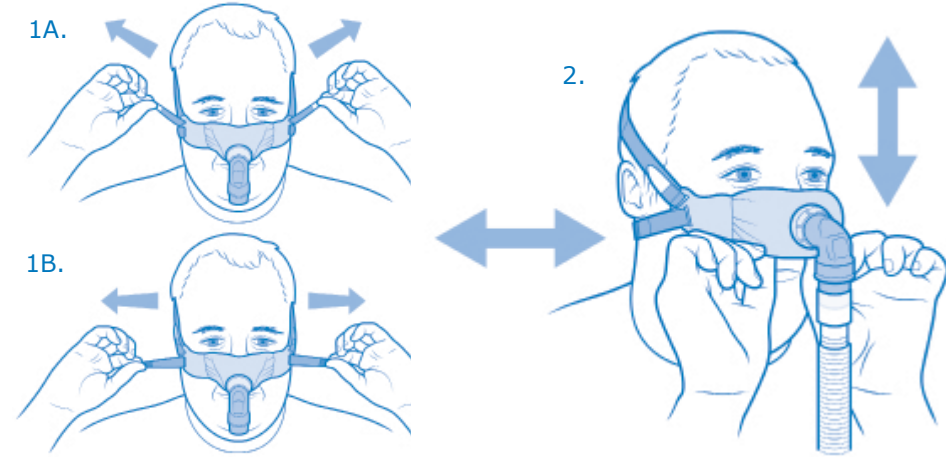

## Maskenin evde temizlenmesi

- SleepWeaver Elan maske iki günde bir aşındırıcı olmayan nitelikte, hafif bir sabun ve ılık suyla elde yıkanmalıdır. Asla sıcak suyla yıkamayın. Gözle görülür derecede temiz olana dek temizleyin.
- İçme kalitesinde suyla iyice durulayın ve doğrudan güneş ışığından uzakta kurumaya bırakın.
- Temizleme esnasında 90 derecelik dirseği takılı tutabilir ya da çıkarıp ayrıca temizleyebilirsiniz.
- Başlığı haftada bir defa elinizde yıkayın.

## Hasta Kullanımından Sonra Temizleme ve Dezenfekte Etme


- Temizleme talimatları için lütfen [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help) adresini ziyaret ediniz.

## Maskenin Başlığa Takılması

1. „Beyaz“ kanca tırnakları tamponun üst kısmındaki yarıklardan geçirin.
2. „Mavi“ kanca tırnakları tamponun alt kısmındaki yarıklardan geçirin.

## 90 Derecelik Dirseği Maske Tamponuna Takılması

1. Maskenin içindeki açıklıktan „Yivli“ parçayı kaydırarak geçirin.
2. „Pul“ parçayı „Yivli“ parçanın üzerine takın.
3. Yivli parçanın üzerine kumaş gelmediğinden emin olun.
4. „Yivli“ parçanın üzerine „Somunu“ takın.

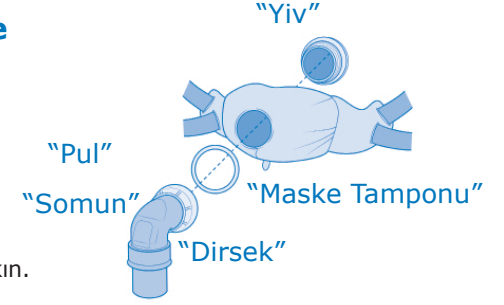

## Gergi Kayışının Başlığa Takılması

1. Hortum başınızın üzerinden geçiyorsa yönlendirmeyi sağlamak için „Gergi Kayışını“ Hafif Hortuma takın.
2. Takıldığı zaman „Gergi Kayışının“ kıvrılmadığından emin olun



## ⚠ Uyarılar

- Bu cihaz havalandırmalı bir maskedir ve çift yollu solunum devresiyle birlikte kullanılmamalıdır.
- Maskenin veya başlığın herhangi bir parçasına karşı reaksiyonlar gelişirse, maskeyi kullanmayı derhal bırakın.
- Tedavi cihazı açılıp düzgün çalışır halde olmadıkça, bu sistem kullanılmamalıdır.
- Havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Maskenin düzgün takıldığından emin olun. Maskenin ve başlığın bu talimat broşürünün ön yüzünde gösterilen şekilde birleştirildiğinden ve takıldığından emin olun.
- Cihazın parçalarından birisinde gözle görülür bir kusur (çatlak, kırık parça, yarılma vs.) varsa veya parçaları temizlikten sonra bile temiz değilse, söz konusu parça atılmalıdır ve yenisi takılmalıdır.
- Bu talimatlarda belirtilenden farklı bir yöntem, temizlik maddesi ile veya farklı bir sıklıkta cihazı temizlemek maske üzerinde ters etkilere sebep olabilir ve nihayetinde tedavinin kalite ve güvenliğini etkileyebilir.
- Maska oksijen takviyesi ile kullanılıyorsa, oksijen akışı makinenin olmadığı durumlarda kesilmelidir, zira biriken oksijen yangın tehlikesi oluşturur.
- Maske oksijen takviyesi ile kullanılıyorsa, hasta sigaradan uzak durmalıdır.